


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

Super Low Low High

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal là vật liệu composite lỏng có độ nhớt và tỷ lệ hạt độn cao, có tính chất cơ học tương đương với composite đặc thông thường. Với hạt độn “LIGHT-DIFFUSION” độc đáo, tạo ra màu sắc phổ quát bao phủ* bằng màu VITA classical A1-D4** và mang lại khả năng đánh bóng dễ dàng với lớp bóng bền vững.




Một màu duy nhất cho tất cả 16 màu của VITA™

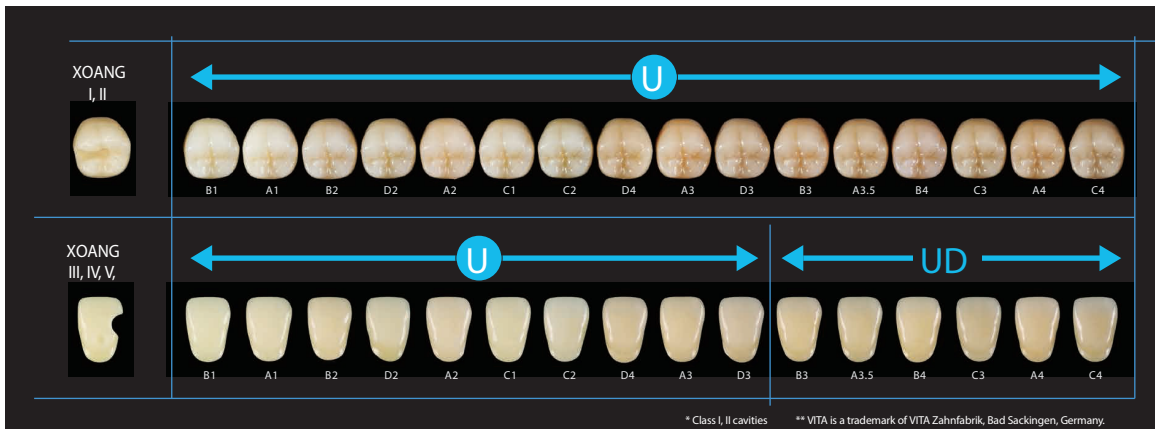

Lợi ích

- ☑ Chỉ một màu (U) cho tất cả các phục hình răng sau, hai màu (U/UD) cho tất cả các phục hình răng trước giảm bớt rắc rối, sai sót khi chọn màu.
- ☑ Giảm bớt sự phức tạp trong quản lý tồn kho


Độ bền cơ học cao

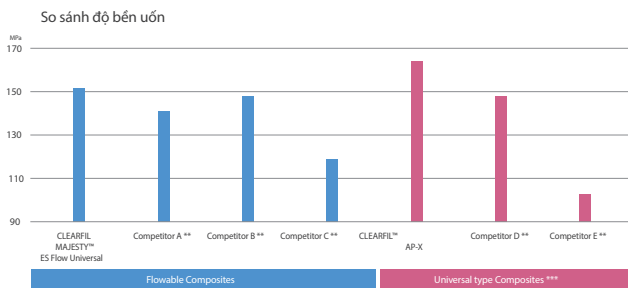

* Values may vary depending on measurement conditions
** Universal type CR: conventional composite resin (paste)

Test conditions:
Flexural strength: in accordance with ISO 4049.
Autograph (Shimadzu Corporation)
Crosshead speed 2mm/min
Source: Kuraray Noritake Dental Inc.

Dễ dàng đánh bóng và độ bóng lâu dài

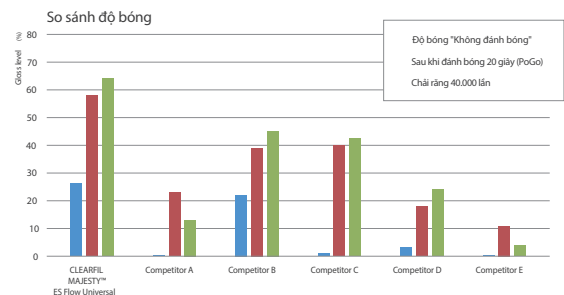

Điều kiện thử nghiệm: Mẫu vật đường kính ϕ 10 mm, độ dày 2 mm
Bề mặt được làm nhám bằng giấy nhám chịu nước #600.
Mức độ bóng của tất cả các vật liệu được đo trong các điều kiện sau: Không đánh bóng; Sau khi lau bằng ethanol.
Đánh bóng: Đánh bóng bằng mũi hoàn thiện composite PoGo (Dentsply Sirona) ở tốc độ 5000 vòng/phút.
Mài mòn đo chải răng: 40.000 lần chải được thực hiện bởi bàn chải đánh răng với lực 250 g, 30 lần chải/phút và kem đánh răng 10% trọng lượng.

** Các giá trị có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện đo.
** Nguồn: Kuraray Noritake Dental Inc.

Lợi Ích

- ☑ Có thể được sử dụng cho mặt nhai của răng hàm

Lợi ích

- ☑ Giảm thời gian đánh bóng và đạt được thẩm mỹ cao.
- ☑ CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal dễ dàng được đánh bóng, duy trì độ bóng hoàn thiện lâu dài nhờ hạt độn cluster và submicron độc đáo.

Hòa trộn tự nhiên

Các màu Universal được thiết kế để tập trung vào độ trong mờ của men răng và độ đậm màu của ngà răng. Hiệu ứng cân bằng này của ngà răng tập trung vào việc mô phỏng răng tự nhiên.



Sự kỳ diệu của khuếch tán ánh sáng

Đặc tính quang học và khả năng hòa trộn nhiều màu. Công nghệ Khuếch tán Ánh sáng (LDT) làm cho các phục hình khó bị nhận ra một cách tự nhiên trong khoang miệng. Vật liệu tích hợp dễ dàng và đẹp mắt vào cấu trúc răng xung quanh



Nhờ có sự khuếch tán ánh sáng màu của nền đen được che phủ đi

Mức độ lỏng FLOWABILITY



Phục hồi trực tiếp với CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

* Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm



Chỉ định điều trị

- 1 Phục hồi trực tiếp cho tất cả các loại xoang, mòn cổ răng (do sâu răng, hoặc không sâu răng), mòn răng và xói mòn răng
- 2 Tạo lớp lót/nền xoang
- 3 Chỉnh sửa vị trí và hình dạng răng (đóng khe thưa, răng dị dạng...)
- 4 Sửa chữa phục hồi răng hoặc phục hình bị gãy trong miệng
- 5 Gắn inlay, onlay, veneer sứ và composite có độ dày dưới 2 mm

SẢN PHẨM HIỆN HÀNH

Low

- #4600-WD CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (U)
- #4601-WD CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (UD)



Super Low

- #4620-WD CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (U)
- #4621-WD CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (UD)



High

- #4610-WD CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal High (U)
- #4611-WD CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal High (UD)

