

RESIN CEMENT

ESTHETIC CEMENT, DUAL-CURING

PANAVIA™ V5

XI MĂNG TỐI GIẢN VÀ THẨM MỸ CHO MỌI NHU CẦU

PANAVIA™ V5 là một loại xi măng nhựa, đa dụng, lưỡng trùng hợp, giải phóng florua, bền màu, thẩm mỹ, đa năng, thao tác đơn giản và dễ dàng lấy xi măng thừa.


PANAVIA™ V5 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng về vật liệu dán với một vật liệu tự trùng hợp có độ bền dán ngà tương đương với chất dán quang trùng hợp “Tiêu Chuẩn Vàng” là CLEARFIL™ SE BOND. Cho đến nay, chưa có sản phẩm xi măng nhựa nào có thể đạt đến độ bền dán ở mức độ này.



MỘT LỌ PRIMER CHO RĂNG “MỚI”

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (dựa trên MDP) với chất xúc tác mới mang lại độ bền dán đặc biệt cao cho tất cả cấu trúc răng ở chế độ tự trùng hợp.

Độ bền dán đo được với răng bò**

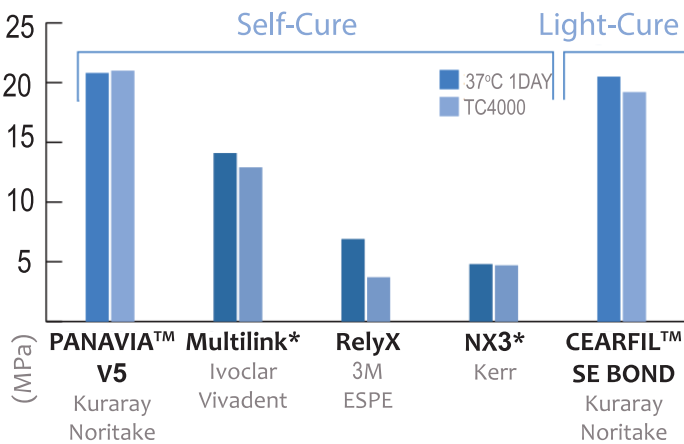

*Not a trademark of KURARAY Co., Ltd


Keo dán Mới



MỘT LỌ PRIMER CHO TẤT CẢ VẬT LIỆU PHỤC HÌNH GIÁN TIẾP

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS chứa monomer MDP nguyên bản và monomer -MPS silane, liên kết với tất cả các loại sứ gốc silica (bao gồm lithium disilicate), zirconia, composite và kim loại.

Độ bền uốn

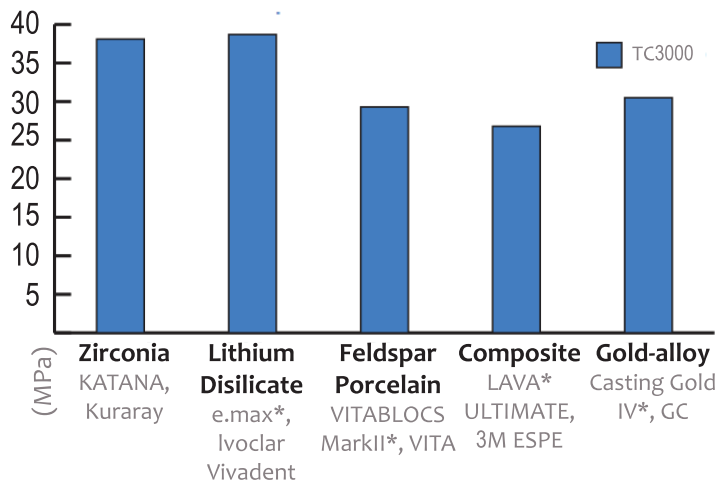

**Source Kuraray Noritake Dental Inc.

Một lọ Primer cho tất cả vật liệu phục hình gián tiếp




ƯU ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH

- Sử dụng trong toàn bộ các chỉ định gắn xi măng kể cả chất dán dính.
- Đầu bơm tự trộn.
- Dễ bơm.
- Độ dày lớp xi măng mỏng.
- Dễ dàng loại bỏ xi măng thừa.
- Đầu bơm cải tiến cho thao tác ở cùi răng.
- Khả năng trám kín tuyệt vời.
- Giải phóng florua, không gây ê buốt sau điều trị.
- Bền màu.
- Độ dán dính cao tuyệt đối.



ỔN ĐỊNH MÀU SẮC KHÔNG CHỨA AMINE


Mọi thay đổi màu sắc nhỏ hơn $\Delta E^* \approx 3$ đều không thể phát hiện được bằng mắt thường. Kết quả chỉ ra rằng ở mỗi khoảng thời gian nghiên cứu, PANAVIA™ V5 không có bất kỳ sự thay đổi nào về màu sắc có thể phát hiện được.

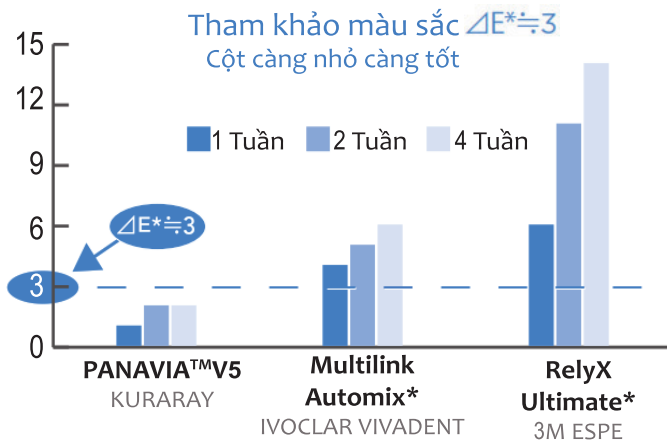

	Trước **	Sau 4 tuần** (ngâm trong nước 71°C)
PANAVIA™V5 (Shade: Clear)		
RelyX Ultimate* (Shade: Translucent)		
Sự phát triển tự nhiên:		
PANAVIA™V5		
Răng tự nhiên		

Source: Kuraray Noritake Dental Inc.


LỰA CHỌN MÀU PHONG PHÚ

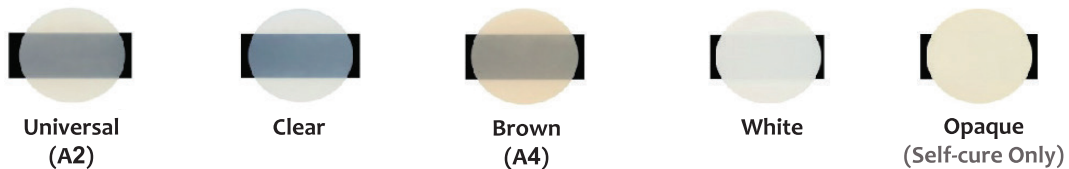

CHỈ ĐỊNH LÂM SÀNG



QUY TRÌNH CƠ BẢN CHO PHỤC HỒI ZIRCONIA & LITHIUM DISILICATE (E.MAX*)

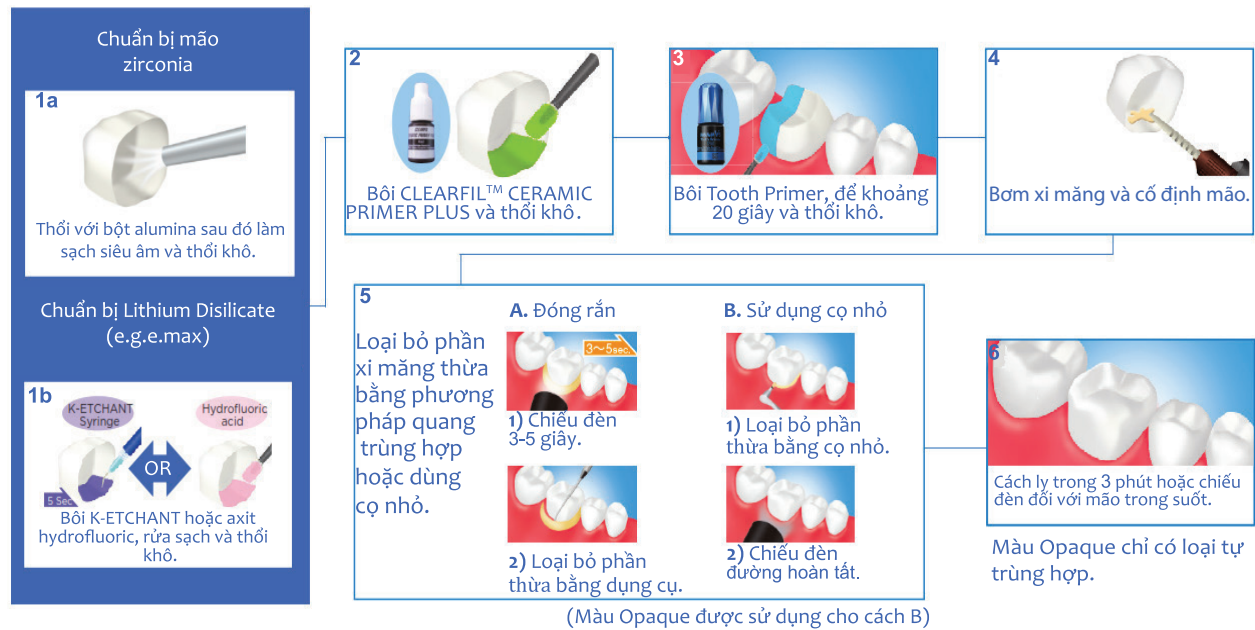

SẢN PHẨM HIỆN HÀNH

RESIN CEMENT



PANA VIA™ V5 Professional Kit

- 1 Syringe (2.4ml) [Universal(A2), Clear, Brown(A4), White, Opaque].
- 1 Try-in Paste (1.8ml) [Universal(A2), Clear, Brown(A4), White, Opaque]
- 1 Tooth Primer (2ml), 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2ml), 1 K-ETCHANT Syringe (3ml), (30 pcs) Mixing tips, (10 pcs) Endo tips, (50 pcs) Applicator brushed (five<silver>), 1 Mixing dish, (20 pcs) Needle tips



PANA VIA™ V5 Standard Kit:

- Universal (A2)
- Clear

Standard Kit contains:

- 1 Syringe (4.6ml)
- 1 Tooth Primer (2ml)
- 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2ml)
- 1 K-ETCHANT Syringe (3ml)
- (15 pcs) Mixing tips, (5 pcs) Endo tips, (50 pcs) Applicator brushed (fine<silver>), 1 Mixing dish, (20 pcs) Needle tips.



PANA VIA™ V5 Introductory Kit:

- Universal (A2)
- Clear

Introductory Kit contains:

- 1 Syringe (2.4ml)
- 1 Tooth Primer (2ml)
- 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2ml)
- (10 pcs) Mixing tips
- (50 pcs) Applicator brushed (fine<silver>), 1 Mixing dish.