

CLEARFIL™ TRI-S BOND Universal Quick

KHÔNG CHỜ ĐỢI, KHÔNG PHỨC TẠP, CHỈ MỘT BƯỚC DUY NHẤT

CLEARFIL™ TRI-S Bond Universal Quick là keo dán nha khoa đa năng, cải tiến, hoạt động ngay lập tức, đảm bảo kết quả bền vững và đồng nhất cho tất cả các thủ thuật phục hình - chỉ trong một bước đơn giản và nhanh chóng, chỉ cần bôi và tiến hành. Không giống như các keo dán truyền thống đòi hỏi thời gian chờ đợi, chà xát nhiều lần và nhiều lớp để đạt được kết quả tối ưu, CLEARFIL™ TRI-S Bond Universal Quick luôn mang lại kết quả đồng nhất.

Sản phẩm không chỉ giúp tiết kiệm được thời gian mà còn loại bỏ nguy cơ sai sót, đảm bảo tất cả các thủ thuật phục hình đều được thực hiện theo cùng tiêu chuẩn cao. Keo dán đáng tin cậy với tất cả các phục hình trực tiếp, chốt, thậm chí cả phục hình gián tiếp và sửa chữa. Sử dụng cho nhiều kỹ thuật etching như: self-etch, Selective-etch và total-etch.




CHỈ ĐỊNH

- Phục hồi trực tiếp bằng composite quang trùng hợp.
- Trám kín xoang như một biện pháp tiền xử lý cho phục hồi gián tiếp.
- Xử lý bề mặt chân răng bị lộ.
- Điều trị chống ê buốt cho răng bị quá cảm.
- Sửa chữa phục hình bị gãy.
- Dùng cho phục hồi và tái tạo cùi bằng xi măng.


ƯU ĐIỂM

- Tự do chọn kỹ thuật etching.
- Phạm vi chỉ định rộng.
- Độ dày lớp keo mỏng.
- Công nghệ Rapid Bond.
- Kết quả có thể dự đoán trước.
- Thời gian chiếu đèn ngắn: 5 giây.
- Độ bền dán cao.

NHANH CHÓNG VÀ ĐỘ BỀN DÁN TUYỆT VỜI

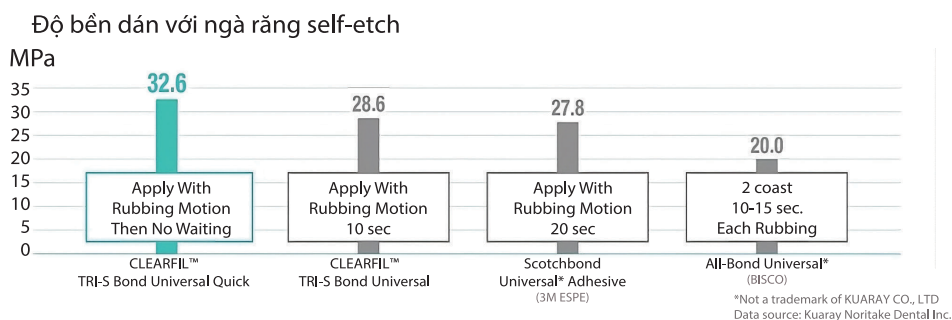

ĐỘ BỀN DÁN TUYỆT VỜI

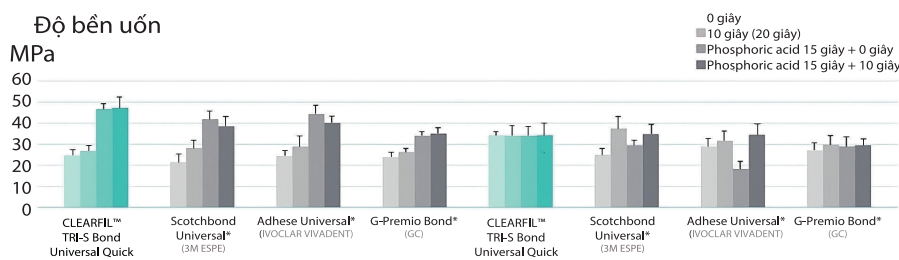

KEO DÁN ĐA NĂNG

Mọi kỹ thuật etching



Self-etch

không axit phosphoric

Selective-etch

Axit phosphoric trên men răng

Total-etch

Axit phosphoric trên men răng và ngà răng

Mọi chỉ định lâm sàng



Phục hồi trực tiếp

Dán xi măng / gắn chốt sợi

Gắn xi măng phục hình gián tiếp

Chữa trị nội nha

Giảm thiểu nhạy cảm ngà sau điều trị

Lớp dán mỏng

Cho phép gắn phục hình gián tiếp vừa vận và thẩm mỹ cao

Cho kết quả tốt nhất trong báo cáo của bác sĩ Gordon J. Christensen

"CLEARFIL™ TRI-S Bond Universal Quick có kết quả tổng thể tốt nhất, đáng chú ý nhất là nhờ giá trị độ bền dán vượt trội và dễ sử dụng nhất."

QUY TRÌNH CƠ BẢN

Phục hồi trực tiếp với composite quang trùng hợp



Chế độ Self-etch qua bước tiếp theo
Chế độ Selective-etch 10 giây
Rửa sạch và thổi khô
Chế độ total-etch 10 giây
Rửa sạch và thổi khô



Bôi với chuyển động chà xát



(Không cần chờ sau khi bôi)



Thổi khô 5 giây
Sử dụng máy hút chân không để ngăn bond bị phân tán



Chiếu đèn 5 giây (LED cường độ cao)

Phục hồi gián tiếp gắn xi măng bằng "PANAVIA™ SA Luting Multi" lên mào Zirconia



Làm sạch và lau khô
Làm sạch và lau khô bề mặt răng sau đó thử lắp phục hình



Thổi hơi (Nếu cần thiết, thổi hơi với bột alumina (30-50um, 0.1-0.4 MPa/15-58PSI/1.4kg - f/cm2) sau đó làm sạch siêu âm và thổi khô)



Tiền xử lý răng
a) Self-etching (qua bước tiếp theo)
b) Selective-etching
c) Total-etching



Bôi Bôi CLEARFIL™ TRI-S Bond Universal Quick với chuyển động chà xát sau đó làm khô bằng cách thổi hơi nhẹ



Gắn xi măng Gắn xi măng sử dụng PANAVIA™ SA Luting Multi theo hướng dẫn của nhà sản xuất



SẢN PHẨM HIỆN HÀNH



CLEARFIL™ TRI-S Bond Universal Quick Refill

• 1 Chai (5.0ml)

CLEARFIL™ TRI-S Bond Universal Quick

• 1 Chai (3x5ml)

CLEARFIL™ TRI-S Bond Universal Quick Mini

• 1 Chai (1.0ml)